

Clearblue® PLUS

con **PUNTA QUE CAMBIA DE COLOR**

- Clearblue® PLUS tiene una precisión superior al 99 % a partir del día en el que espera el comienzo del período.
- Clearblue® PLUS puede utilizarse a partir de 5 días antes del retraso del período.

Lea este folleto con atención antes de realizar una prueba.

Prueba de embarazo

Antes de comenzar

Cuando realice la prueba, puede ser útil que tenga a mano un reloj.

1 CÓMO REALIZAR UNA PRUEBA

Si realiza la prueba a partir del día en el que espera el comienzo del período, puede realizarla en cualquier momento del día.
Si realiza la prueba antes del día en el que espera el comienzo del período, utilice la primera orina del día.

REALICE LA PRUEBA EN EL CHORRO DE URINA

Puede realizar la prueba directamente en el chorro de orina **o** en una muestra de orina recolectada en un recipiente limpio y seco.

- Sostenga la punta que cambia de color hacia abajo en el chorro de orina **o** en la muestra de orina que recogió, tal como se muestra, durante **5 segundos**.
- La punta que cambia de color se volverá instantáneamente de color rosa, lo que demuestra la absorción de orina.



Debe continuar sosteniendo la punta que cambia de color en la orina durante los 5 segundos.



Chorro de orina **o** Muestra recolectada

- Mantenga la punta que cambia de color hacia abajo o coloque la varilla de prueba en una superficie plana hasta que esté lista para leer el resultado y haya aparecido una línea azul en la ventana de control.
- Se recomienda volver a colocar la tapa.

Consulte la **pregunta 7** si la punta que cambia de color no se puso completamente rosa.

A medida que la prueba comienza a funcionar, observará que aparecen líneas azules.

2 **3 minutos**

ESPERE 3 MINUTOS.

Ventana de resultado Ventana de control

3 CÓMO LEER EL RESULTADO


Puede leer el resultado en la ventana de resultado.

Debe haber una línea azul en la ventana de control cuando lea el resultado. Esta línea muestra que la prueba ha funcionado.

Un resultado de "Embarazada" puede aparecer en 1 minuto si realiza la prueba a partir del día en que tenga un retraso del período (es decir, el día posterior a la fecha en la que esperaba el comienzo del período, pero no comenzó).

Debe esperar 3 minutos para confirmar un resultado de "No Embarazada" o si realiza la prueba antes del retraso del período (consulte la pregunta 11).

Si no hay una línea azul en la ventana de control dentro de los **10 minutos**, esto significa que la prueba no ha funcionado (consulte la **pregunta 8**).

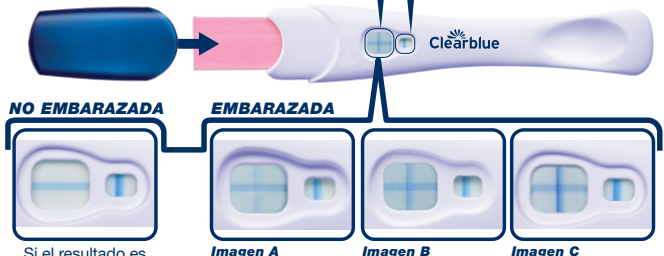

Si el resultado es "No Embarazada", consulte la **pregunta 13** en la sección Preguntas y respuestas.

Si el resultado es "Embarazada", consulte la **pregunta 14** en la sección Preguntas y respuestas.

No importa si una de las líneas que forman el símbolo "+" es más clara o más oscura que la otra: el resultado es "Embarazada".

¡IMPORTANTE! Lea el resultado dentro de los **10 minutos** de realizada la prueba.

Ignore cualquier cambio del resultado que se produzca después de este plazo. Si aún no está segura del resultado, consulte la **pregunta 9** para obtener más información.

Preguntas y respuestas: Lea la sección del reverso, que responde las preguntas más frecuentes.

¿Preguntas y respuestas

1. ¿Qué nivel de precisión tiene Clearblue® PLUS?

Según pruebas de laboratorio, Clearblue® PLUS tiene una precisión superior al 99 % cuando se usa a partir del día en el que espera el comienzo del período.

2. ¿Cómo funciona Clearblue® PLUS?

Cuando usted está embarazada, su organismo produce la hormona del embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana). La cantidad de hCG del organismo aumenta en la etapa inicial del embarazo. Clearblue® PLUS puede detectar cantidades diminutas de esta hormona en la orina (la sensibilidad de esta prueba es de 25 mIU/ml).

3. ¿Cuándo me puedo realizar una prueba con Clearblue® PLUS?

Clearblue® PLUS puede usarse hasta 5 días antes del retraso del período (es decir, 4 días antes del día en el que espera el comienzo del período). Si se realiza la prueba antes del día en el que espera el comienzo del período y obtiene un resultado de "No Embarazada", aún existe la posibilidad de que esté embarazada. Consulte el cuadro que figura a continuación para ver los resultados de pruebas clínicas de Clearblue® PLUS con muestras anticipadas de embarazo.

Pruebas anticipadas	
Cantidad de días antes del día en el que espera el comienzo del período	% de muestras de embarazadas con resultado de "Embarazada"
-1	98 %
-2	97 %
-3	88 %
-4	56 %

4. ¿Debo usar una muestra de la primera orina del día?

Si realiza la prueba antes del día en el que espera el comienzo del período, le recomendamos utilizar la primera orina del día. De lo contrario, puede realizarla en cualquier momento del día. Evite beber mucho líquido antes de realizar la prueba.

5. No estoy segura de la fecha de mi próximo período.

¿Cómo puedo saber si estoy realizando la prueba en el momento indicado?

- Para calcular el día en el que espera el comienzo del período, calcule la duración habitual de su ciclo contando la cantidad de días transcurridos desde el primer día del período hasta el día anterior al inicio del período siguiente.
- Si tiene ciclos irregulares, debe dejar que transcurra una duración similar al ciclo más largo de los últimos meses antes de realizar la prueba.
- Si no tiene idea del día en el que espera el comienzo del período, le recomendamos realizar la prueba no menos de 19 días después de la última vez que tuvo relaciones sexuales sin protección.
- Si el resultado es "No Embarazada" y aún sospecha la posibilidad de un embarazo, consulte la **pregunta 13**.

6. ¿Existe algún medicamento o alguna condición médica que pueda afectar el resultado?

- Siempre lea las instrucciones del fabricante de los medicamentos que está tomando antes de realizar una prueba.
- Los medicamentos para la fertilidad que contienen hCG pueden generar resultados engañosos (estos medicamentos para la fertilidad con frecuencia se administran de manera inyectable, y es posible que las pruebas realizadas poco tiempo después de la administración den un resultado de "Embarazada" falso).
- Otras terapias de fertilidad (como el citrato de clomifeno), los analgésicos y los anticonceptivos hormonales (por ejemplo, la píldora anticonceptiva) no deberían afectar el resultado.
- Si dejó de tomar anticonceptivos hormonales recientemente o utiliza terapias de fertilidad, como citrato de clomifeno, sus períodos pueden ser irregulares, lo que provocará que realice la prueba con demasiada anticipación.
- Si recientemente ha estado embarazada (incluso si no llegó a término), puede obtener un resultado de "Embarazada" falso.
- El embarazo ectópico, los quistes de ovarios, la menopausia y algunas condiciones médicas no comunes pueden producir resultados engañosos.
- Si ha obtenido un resultado de "Embarazada", es posible que posteriormente descubra que no está embarazada debido a la pérdida natural del embarazo que puede ocurrir en las etapas iniciales.

Si obtiene resultados inesperados, consulte a su médico.

7. Utilicé la prueba de embarazo, pero la punta que cambia de color no se puso completamente rosa. ¿Qué debo hacer?

Si la punta que cambia de color no se puso completamente rosa, es posible que no haya aplicado una cantidad de orina suficiente. Sin embargo, si la línea azul en la ventana de control aparece dentro de los 10 minutos de realizada la prueba, esto significa que ha funcionado. Si no hay una línea azul en la ventana de control dentro de los 10 minutos de realizada la prueba, consulte la **pregunta 8**.

8. Utilicé la prueba de embarazo, pero no apareció ninguna línea azul en la ventana de control. ¿Qué debo hacer?

Si no hay una línea azul en la ventana de control dentro de los 10 minutos de realizada la prueba, esto significa que la prueba no ha funcionado. Esto puede ocurrir por las siguientes razones:

- La punta que cambia de color no se mantuvo hacia abajo, o la varilla de prueba no se colocó en una superficie plana después de aplicar la orina.
- Se utilizó demasiada orina o muy poca. **La muestra se debe tomar durante 5 segundos.**

Debe volver a realizar la prueba con una varilla de prueba nueva, teniendo cuidado de seguir las instrucciones. Quizás desee recolectar una muestra de orina en un recipiente limpio y seco para, luego, sumergir solamente la punta que cambia de color durante 5 segundos.

9. ¿Qué hago si no estoy segura del resultado?

- Para que el resultado sea "Embarazada", debe haber una línea azul en la ventana de control y un símbolo "+" en la ventana de resultado dentro de los 10 minutos de realizada la prueba.
- El aspecto del símbolo "+" en la ventana de resultado puede variar. Sin embargo, las líneas que forman el símbolo "+" y la línea de la ventana de control deben tener un ancho similar (consulte las imágenes A-C).

Imagen A

Esto indica un resultado de "Embarazada". Esto es más probable al realizar la prueba antes del día en el que espera el comienzo del período, cuando es posible que los niveles de hCG sean relativamente bajos.

Imagen B

Esto no es inusual cuando está embarazada y realiza la prueba el día en el que espera el comienzo del período o cerca de esa fecha, ya que los niveles de hCG aún pueden ser relativamente bajos.

Imagen C

Esto es más probable que suceda cuando está embarazada y realiza la prueba unos días después del día en el que espera el comienzo del período, ya que los niveles de hCG son más altos.

Si aún no está segura del resultado, debe esperar al menos 3 días antes de realizar la prueba nuevamente, teniendo cuidado de seguir las instrucciones.

- Para que el resultado sea "No Embarazada", debe haber una línea azul en la ventana de control y un símbolo "-" (menos) en la ventana de resultado dentro de los 10 minutos de realizada la prueba. Si el resultado es "No Embarazada" y aún sospecha la posibilidad de un embarazo, consulte la **pregunta 13**.

10. ¿Qué podría afectar la precisión del resultado?

Si realiza la prueba antes del día en el que espera el comienzo del período, la precisión de Clearblue® PLUS será menor. Si no toma una muestra de orina durante la cantidad de tiempo adecuada, es posible que no obtenga un resultado confiable. Sin embargo, siempre que observe una línea azul en la ventana de control dentro de los 10 minutos de realizada la prueba, puede confiar en el resultado. Si obtiene resultados inesperados de forma repetida, consulte a su médico. Consulte, también, la **pregunta 6**.

11. ¿Cuándo puedo leer el resultado?

Un resultado de "Embarazada" puede aparecer tan rápido como en 1 minuto si realiza la prueba a partir del día en que tenga un retraso del período (es decir, la fecha posterior al día en el que esperaba el comienzo del período, pero no comenzó). También, asegúrese de que haya una línea azul en la ventana de control antes de leer el resultado. **Debe** esperar 3 minutos para confirmar un resultado de "No Embarazada" o si realiza la prueba antes del día en el que espera el comienzo del período. Si no hay una línea azul en la ventana de control dentro de los **10 minutos**, esto significa que la prueba no ha funcionado (consulte la **pregunta 8**).

12. ¿Cuánto tiempo durará el resultado?

Puede leer el resultado en cualquier momento entre los 3 y 10 minutos después de la realización de la prueba. Después de 10 minutos, cualquier cambio que se produzca en el resultado no debe tomarse en cuenta.

13. La prueba indicó "No Embarazada". ¿Qué debo hacer?

Es posible que no esté embarazada, que el nivel de la hormona del embarazo no sea lo suficientemente alto todavía como para detectarse, o que haya calculado mal el día en el que esperaba el comienzo del período.

- Si realizó la prueba anticipadamente, vuelva a realizarla en el día en el que espera el comienzo del período.
- Si tiene un retraso, realice la prueba nuevamente en 3 días. Si esta prueba le da un resultado de "No Embarazada" y aún no ha tenido el período, consulte a su médico.

14. La prueba indicó "Embarazada". ¿Qué debo hacer?

Si la prueba indica que está embarazada, debe consultar a su médico, quien le aconsejará sobre los próximos pasos que debe seguir.

Para conocer los próximos pasos, obtener información y consejos en general acerca de temas relacionados con el embarazo, visite nuestro sitio web en

www.clearblue.com

Fabricado por: Abbott Diagnostics (Shanghai) Co., Ltd., China.
Para: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47,
1213 Petrálaney, Ginebra, Suiza.

Colombia: Importado y Distribuido por: Procter & Gamble Colombia Ltda. Carrera 7 No. 114-33 Piso 12, Bogotá D.C. Colombia. Perú: Importado y Distribuido por: Procter & Gamble Perú S.A. Av. Juan de Arona 151, Oficina 302, Lima - Perú.




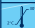


RUC 201000127165. Chile: Distribuido por DHL Supply Chain Chile S.A., Av. Boulevard Poniente N°1313, Edificio 11, Módulo 8 y 15, Santiago - Chile. Importado por Laboratorio Chile S.A., Marafion 1315, Santiago - Chile. Ecuador: Importado y distribuido por: Quitafex S.A. Quito - Ecuador.

Este dispositivo es para uso doméstico. Conservar a temperatura ambiente. Conservar entre 2 °C y 30 °C. Mantener fuera del alcance de los niños.

Solo para uso de diagnóstico *in vitro*. Deseché con los residuos domésticos habituales. No utilizar si el envoltorio está dañado.

No utilizar una varilla de prueba después de su fecha de vencimiento. Contiene piezas pequeñas. No ingiera ningún componente de este dispositivo. En caso de ingestión accidental, busque atención médica. No desarme el dispositivo.

Clearblue es una marca comercial de SPD.
© 2022 SPD. Todos los derechos reservados.

 Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>	 Código de lote	 No reutilizar
 Límite de temperatura de 2 °C a 30 °C	 Fecha de vencimiento	 Fabricante